



Conectividad de Nx2me

Guía de inicio rápido

Conectividad de Nx2me

Guía de inicio rápido

El NxStage ConNxBox y el router NxStage se utilizan para transferir los datos del tratamiento a su centro de diálisis. La aplicación para pacientes con HDH (Nx2me) recibe datos del ciclador a través de WiFi y transmite hojas de registro de datos al portal del proveedor a través de la red *NxStageRouter*.

Esta guía Proporciona instrucciones rápidas para configurar el router NxStage en casa.

Consulte la Guía del usuario para obtener advertencias e instrucciones más detalladas. Este material complementario no reemplaza las Instrucciones de Uso (IFU). Los usuarios deben revisar y consultar las Instrucciones de Uso para obtener información completa sobre el producto.

¿Tiene preguntas o problemas? Contáctenos. Estamos disponibles para ayudarle.

EE. UU. Asistencia técnica:

1-866-NXSTAGE (1-866-697-8243) o techsupport@fmc-na.com

U. E. Asistencia técnica:

digital.services.emea@freseniusmedicalcare.com



Contenido

Opciones de conectividad de Internet en casa	4
--	---

Router NxStage con adaptador WiFi

Conexión del router NxStage a una red doméstica	5
---	---

Router NxStage con adaptadores WiFi y Powerline

Conexión del router NxStage al primer adaptador Powerline.....	6
--	---

Conexión de un router doméstico al segundo adaptador Powerline	7
--	---

Conexión del adaptador Wi-Fi	8
------------------------------------	---

Conexión del iPad al router NxStage	9
---	---

Verificación de todas las conexiones	10
--	----

Precauciones comunes de conectividad	10
--	----

Opciones de conectividad de Internet en casa

La opción de conectividad **A** es la configuración estándar. Las otras opciones de conectividad pueden usarse si el soporte técnico lo recomienda.


Router NxStage con adaptador WiFi **A**




Router NxStage con Direct Connect **B**



Router NxStage con adaptadores WiFi y Powerline **C**

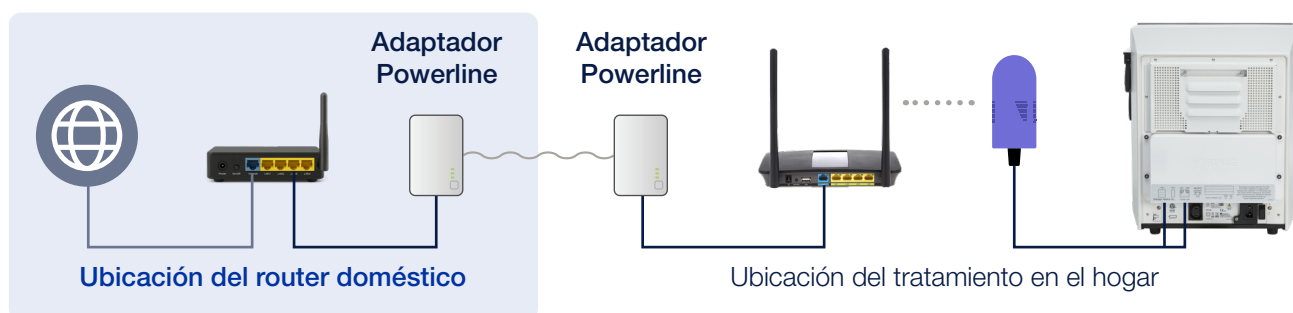

Router NxStage con Direct Connect y adaptadores Powerline **D**

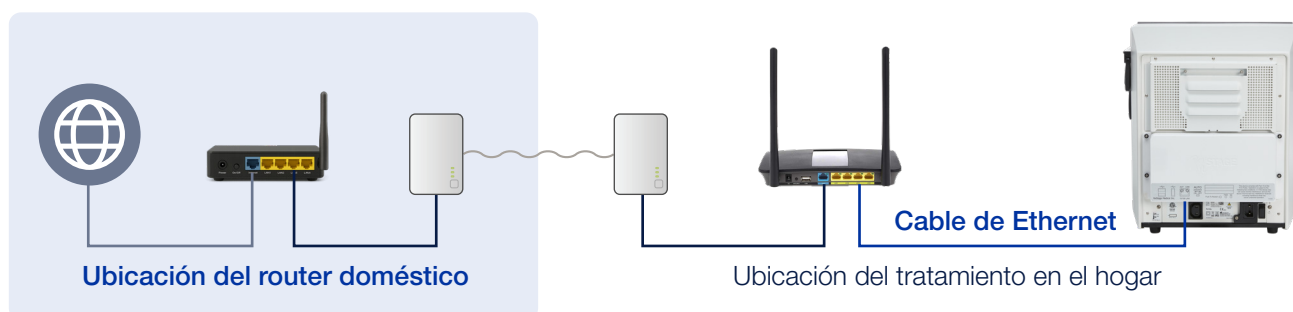

A Router NxStage con adaptador WiFi

Conectividad cuando el router doméstico se encuentra cerca de la zona de tratamiento

Conexión del router NxStage a una red doméstica


1. Coloque el router NxStage

en un lugar adecuado:

- Superficie plana y seca
- A menos de 10 metros (30 pies) del ciclador
- Cerca del router doméstico
- Acceso directo a la toma de corriente




2. Conecte el extremo libre del cable de Ethernet a un puerto LAN (red de área local) del router doméstico.

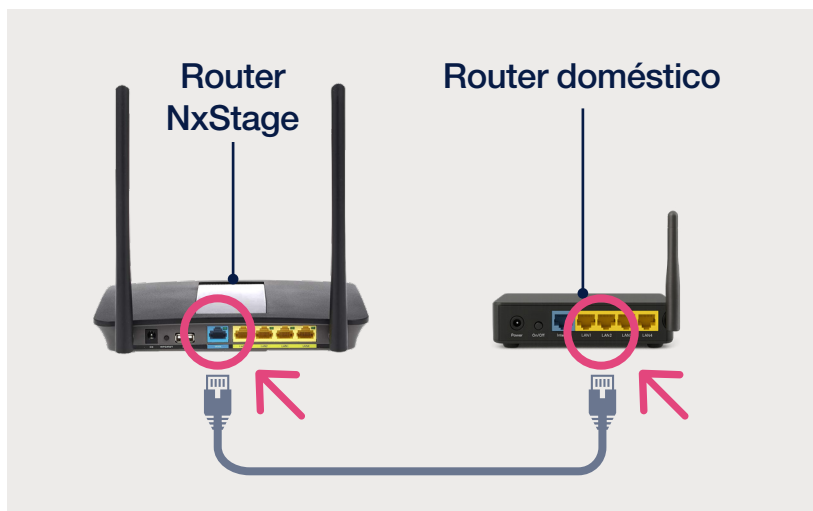

3. Conecte el adaptador de corriente al router NxStage y **enchúfelo** a una toma de corriente.

El router NxStage puede tardar hasta 2 minutos en encender. La luz azul se iluminará cuando esté listo.

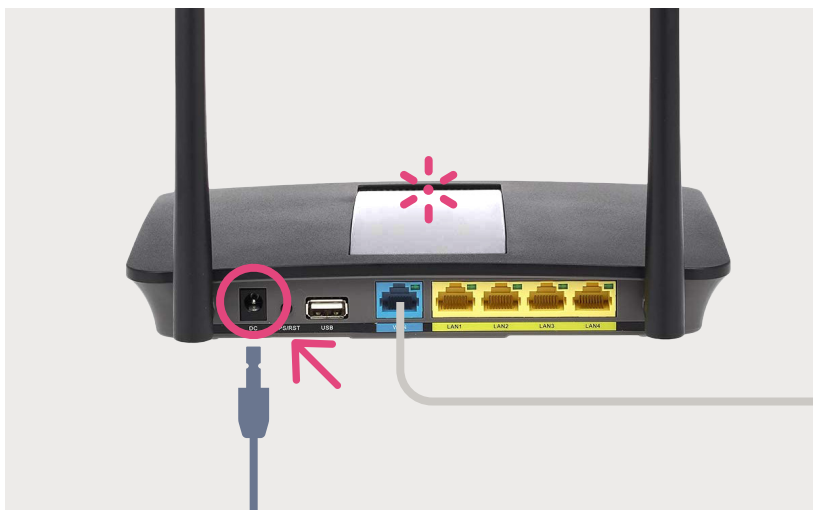

C Router NxStage con adaptadores WiFi y Powerline

Conectividad cuando el router doméstico está situado más lejos de la zona de tratamiento

Conexión del router NxStage al primer adaptador Powerline


1. **Coloque** el router NxStage en un lugar adecuado:
 - Superficie plana y seca
 - A menos de 10 metros (30 pies) del ciclador
 - Acceso directo a la toma de corriente



2. Conecte un adaptador Powerline proporcionado por NxStage *directamente* a una toma de corriente cercana al router NxStage.
No enchufe el adaptador Powerline a una regleta.




3. **Conecte** un cable de Ethernet desde el adaptador Powerline al puerto WAN del router NxStage.

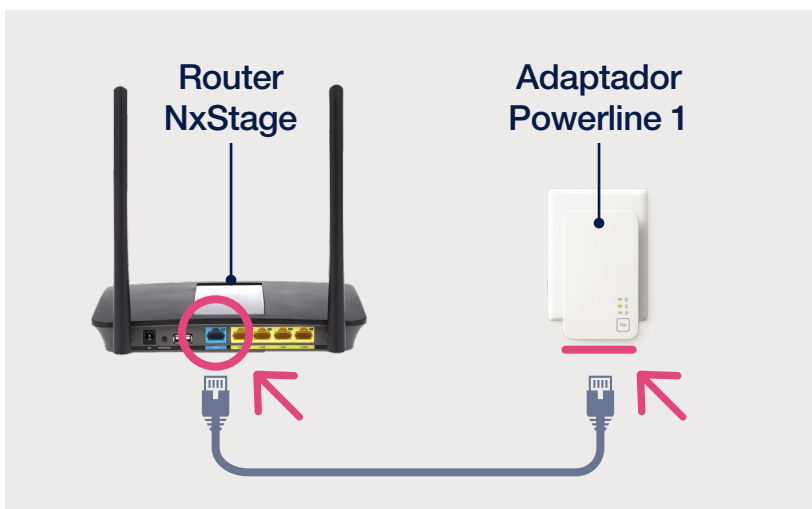

- 4. Conecte** el adaptador de corriente al router NxStage y enchúfelo a una toma de corriente.

El router NxStage estará operativo después de 2 minutos y la luz WLAN empezará a parpadear.

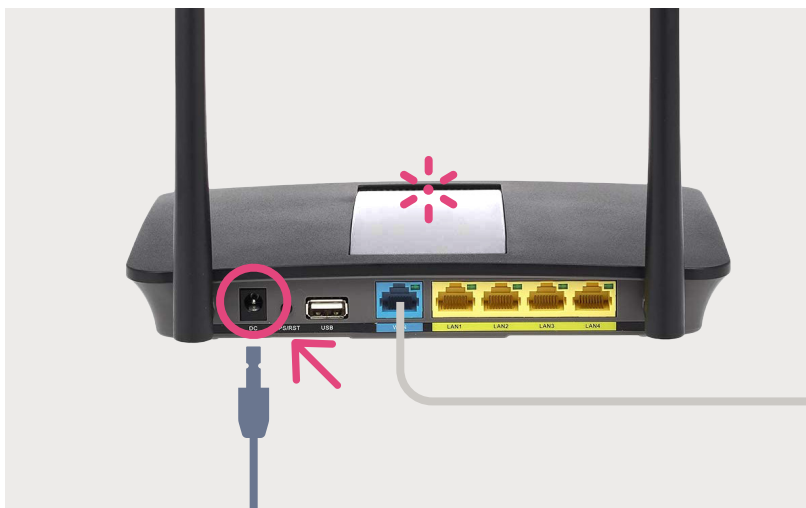

Conexión de un router doméstico al segundo adaptador Powerline


- 1.** Conecte el segundo adaptador Powerline proporcionado por NxStage *directamente* a una toma de corriente cercana a su router doméstico.

No enchufe el adaptador Powerline a una regleta.




- 2. Conecte** un cable de Ethernet desde el adaptador Powerline a un puerto LAN del router doméstico.

Verifique que las luces frontales del adaptador Powerline estén encendidas o parpadeen.

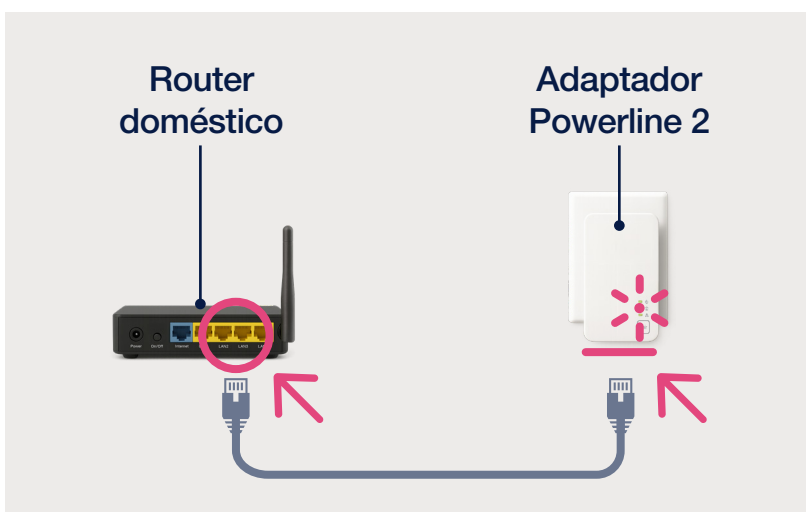


Conexión del adaptador Wi-Fi


1. Conecte el *cable USB* del adaptador Wi-Fi a uno de los puertos USB y el *cable de red* del adaptador Wi-Fi al puerto de red, en la parte inferior de la ConNxBox.

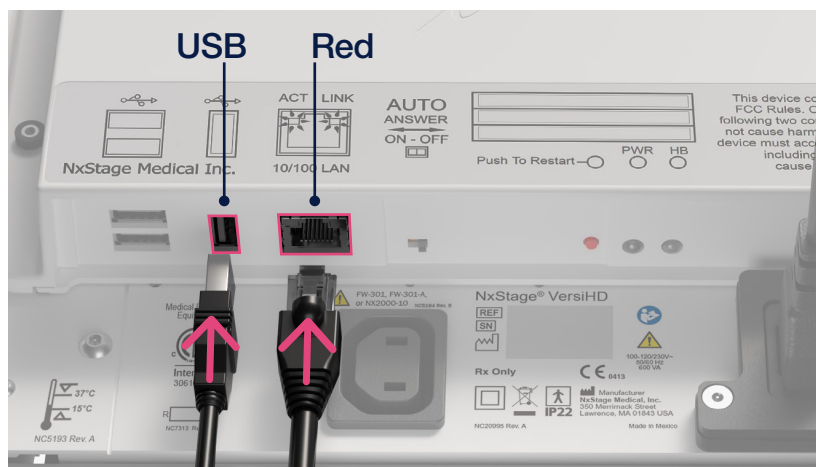

2. Despegue la película transparente de la parte posterior del adaptador Wi-Fi USB y fíjelo al lateral del ciclador sin el portafiltros.

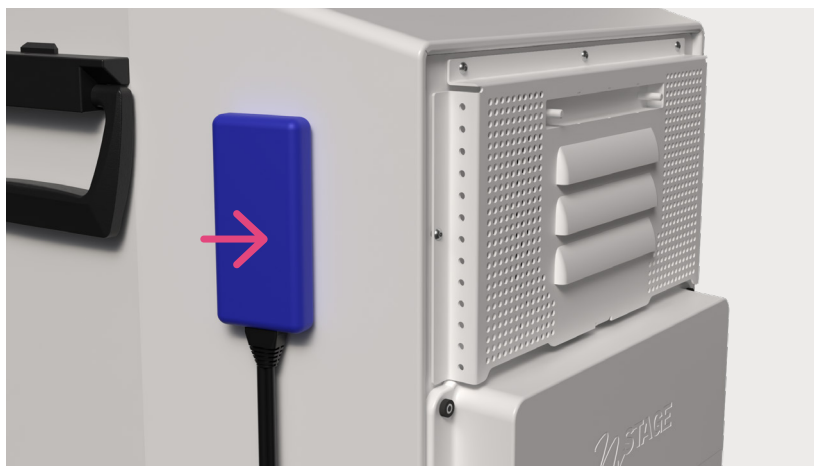

3. Presione y suelte el botón *Push to Restart* (Presionar para reiniciar) situado en la parte inferior de la ConNxBox. Después de 2 minutos, la luz del adaptador Wi-Fi empezará a parpadear lentamente, indicando la conectividad de la red.

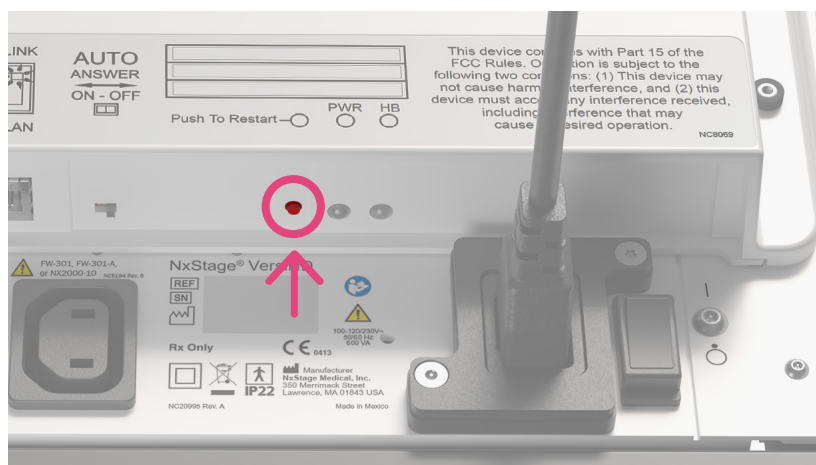


NO Presione el botón de reinicio del adaptador Wi-Fi.

Conexión del iPad al router NxStage


1. En el iPad, abra la aplicación **Nx2me** presionando sobre su icono.



2. Vuelva a la pantalla de inicio y abra la aplicación **Settings** (Configuración).
 - Seleccione **Wi-Fi** en la columna de la izquierda
 - Active **Wi-Fi**
 - Seleccione NxStageRouter en la columna derecha

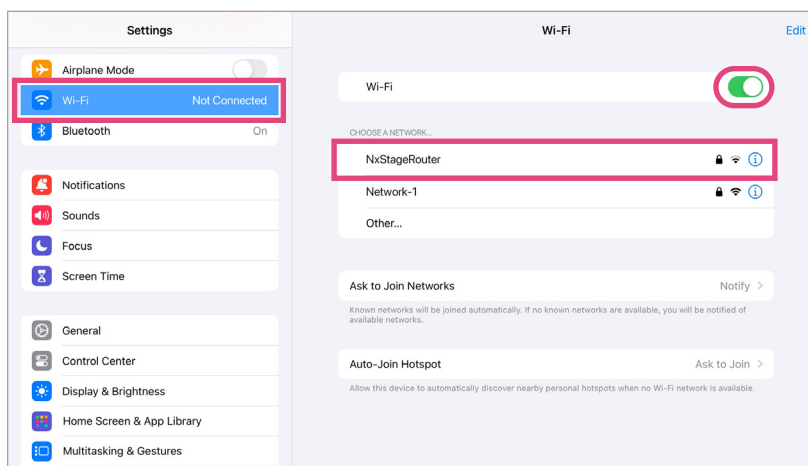


3. Inicie sesión en la aplicación y verifique la hora y la fecha de **Last sync** (Última sincronización) para confirmar la conectividad a Internet. Puede que tenga que presionar el icono de sincronización

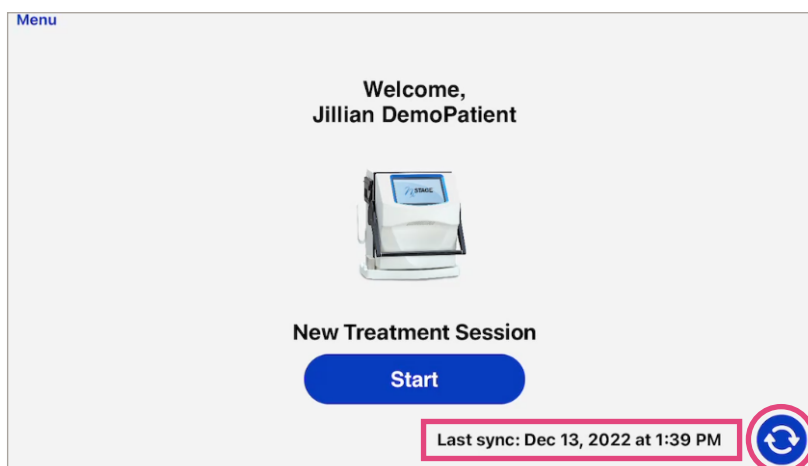


Verificación de todas las conexiones

1. En la aplicación, presione el icono **Menu** (Menú)  en la barra de navegación y, a continuación, seleccione **Settings** (Configuración).

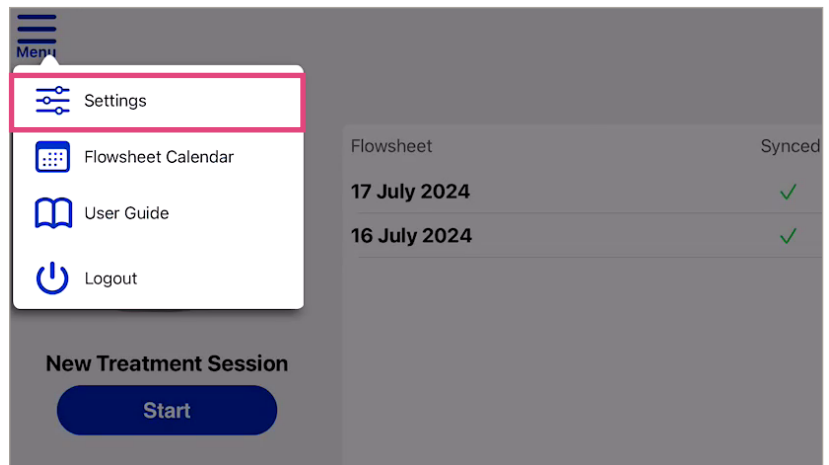

2. Verifique que el **ConNxBBox status** (Estado de la ConNxBBox) sea **Connected** (Conectado) y que el **cycler serial number** (número de serie del ciclador) sea correcto.

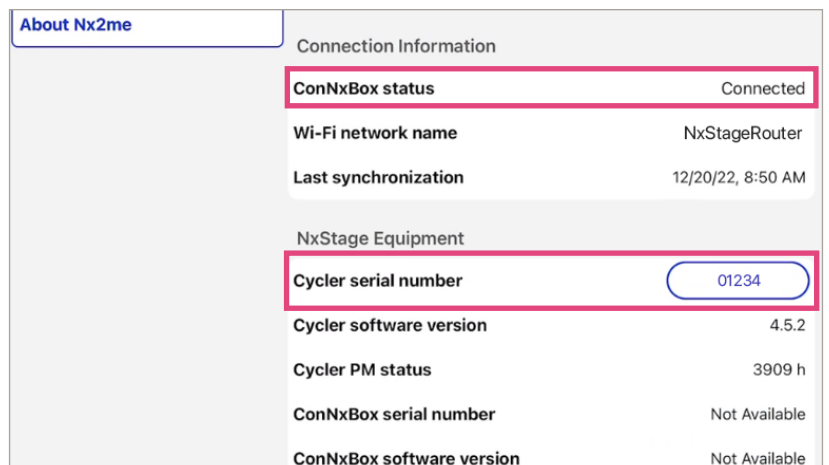

Precauciones comunes de conectividad

Mensaje de precaución	Acción recomendada
Looking for Cycler [serial #] (Buscando el ciclador [n.º de serie])	Se ha perdido la conexión entre el ciclador y la aplicación. Seleccione Guide Me (Guiarme) para ver las instrucciones de solución de problemas.
Connected, no Cycler data (Conectado, sin datos del ciclador)	El iPad está conectado pero no recibe datos. Por lo general, esto significa que el ciclador no se ha encendido – Turn on Cycler (Encienda el ciclador).

