



Gateway wifi kinexus®

Guía de inicio rápido

Guía de inicio rápido del Gateway wifi kinexus

El Gateway wifi kinexus se utiliza para transferir los datos del tratamiento a su centro de diálisis. La transferencia de datos solo se produce cuando la cicladora Liberty Select está conectada al Gateway y se establece una conexión wifi.

Esta guía está destinada a proporcionar a los pacientes una guía rápida para configurar y conectar el Gateway wifi Kinexus a la cicladora Liberty Select.

Consulte la Guía del usuario para obtener advertencias e instrucciones más detalladas. Este material complementario no reemplaza la Guía del usuario del Gateway wifi kinexus. Los usuarios deben revisar y consultar la Guía del usuario para obtener información completa sobre este producto.

¿Tiene preguntas o problemas? Póngase en contacto con soporte técnico llamando al 800-227-2572



Antes de comenzar:

- Encienda su dispositivo móvil y asegúrese de que el Bluetooth esté habilitado.
- Tenga a mano el nombre de la red wifi deseada.
- Tenga a mano la contraseña de la red wifi.

Configurar el Gateway

1. **Abra** el paquete y **verifique** si hay piezas faltantes o dañadas.



2. **Conecte** el cable de alimentación al Gateway y **enchufe** el adaptador de corriente a un tomacorriente de pared.



No utilice un enchufe múltiple.

3. **Espere** aproximadamente **3 minutos** para que el LED de **estado** se vuelva de color **verde**. Es posible que escuche una señal sonora de “Gateway is ON” (el Gateway está encendido).



Instalar la aplicación kinexus


1. **Descargue e instale** la aplicación **Kinexus Wi-Fi** de la App Store o Google Play en su dispositivo móvil.




2. Abra la aplicación. Si se le solicita que acceda a la ubicación, seleccione **While using the app** (Mientras utiliza la aplicación).




3. Presione **Start** (Comenzar) y permita el acceso al Bluetooth.

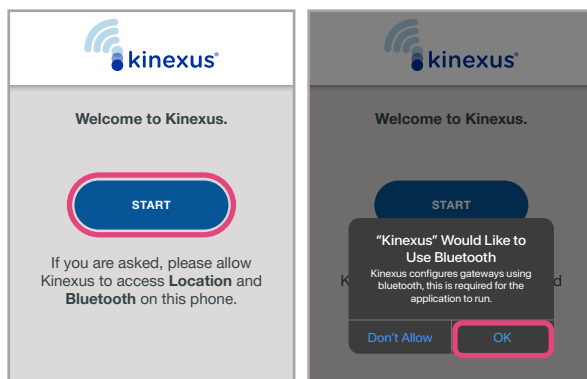

4. Seleccione su Gateway y toque **Pair** (Emparejar) cuando se le solicite.

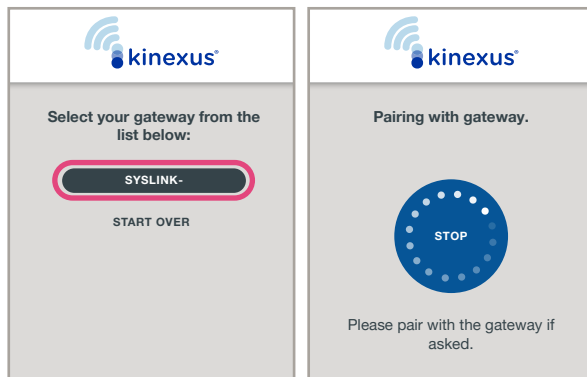

5. Seleccione la red wifi de su casa e ingrese su contraseña. Seleccione **Apply** (Aplicar) cuando se le solicite.
- Aparece el mensaje **Success!** (¡Éxito!) cuando se completa la conexión.

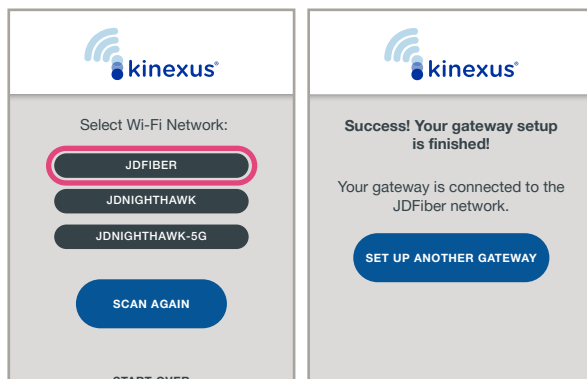

Conectar la cicladora Liberty Select al Gateway

1. Asegúrese de que la cicladora esté **apagada**.



2. **Conecte** el extremo RS-232 del cable a la cicladora.

Presione los tornillos de mariposa para ajustar firmemente el conector.



3. **Gire** ambos tornillos de mariposa en el sentido de las agujas del reloj con los dedos hasta que queden apretados.

Precaución: **No utilice un destornillador** para ajustar la conexión del cable. Es posible que se produzcan daños en su dispositivo.



- 4. Conecte** el extremo USB del cable al puerto USB del Gateway.

Nota: El Gateway wifi debe estar encendido durante **5 minutos** antes de encender la cicladora.



- 5. Encienda** la cicladora Liberty Select.



Lea las instrucciones de uso para un uso seguro y adecuado de este dispositivo. Para obtener una descripción completa de los peligros, las contraindicaciones, los efectos secundarios y las precauciones, consulte la etiqueta completa del paquete en www.fmcna.com.

Indicaciones de uso: la cicladora Liberty Select de Fresenius está indicada para la diálisis peritoneal aguda y crónica.

Precaución: la ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo por parte de un médico o por orden de un médico.

Uso: el Gateway kinexus está diseñado para transmitir datos de terapia de diálisis en el hogar y datos de pacientes que utilizan ciertos productos de Fresenius Medical Care, incluidas las cicladoras de diálisis peritoneal.

kinexus no es una historia clínica electrónica (Electronic Health Record, EHR) ni una solución de facturación.

© 2024 Fresenius Medical Care. Todos los derechos reservados. Fresenius Medical Care, el logotipo del triángulo, Liberty y kinexus son marcas comerciales de Fresenius Medical Care Holdings, Inc. o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

P/N 480174S Rev. B 10/2024