



Gateway celular kinexus®

Guía de inicio rápido

Gateway celular kinexus

Guía de inicio rápido

El Gateway celular Kinexus se utiliza para transferir los datos del tratamiento a su centro de diálisis. La transferencia de datos solo se produce cuando la cicladora Liberty Select está conectada al Gateway y se establece una conexión celular.

Esta guía está destinada a proporcionar a los pacientes una guía rápida para configurar y conectar el Gateway celular Kinexus a la cicladora Liberty Select.

Consulte la Guía del usuario para obtener advertencias e instrucciones más detalladas. Este material complementario no reemplaza la Guía del usuario del Gateway celular kinexus. Los usuarios deben revisar y consultar la Guía del usuario para obtener información completa sobre este producto.

¿Tiene preguntas o problemas? Póngase en contacto con soporte técnico llamando al 800-227-2572



NOTA: No conecte ni desconecte el Gateway de la cicladora mientras esta esté encendida.

Configurar el Gateway

1. **Abra** el paquete y **verifique** si hay piezas faltantes o dañadas.



2. **Apriete** las antenas en la parte posterior del Gateway con los dedos hasta que queden apretadas.



- 3. Conecte** el cable de alimentación al Gateway y **enchufe** el adaptador de corriente a un tomacorriente de pared.

No utilice un enchufe múltiple.




- 4. Espere** aproximadamente **3 minutos** para que el LED de **estado** se vuelva de color **verde**. Es posible que escuche una señal sonora de “Gateway is ON” (el Gateway está encendido).



- 5. Observe** las luces de intensidad de la señal mientras gira lentamente las antenas en la parte posterior del Gateway. Colóquelas para obtener la intensidad de señal más fuerte.



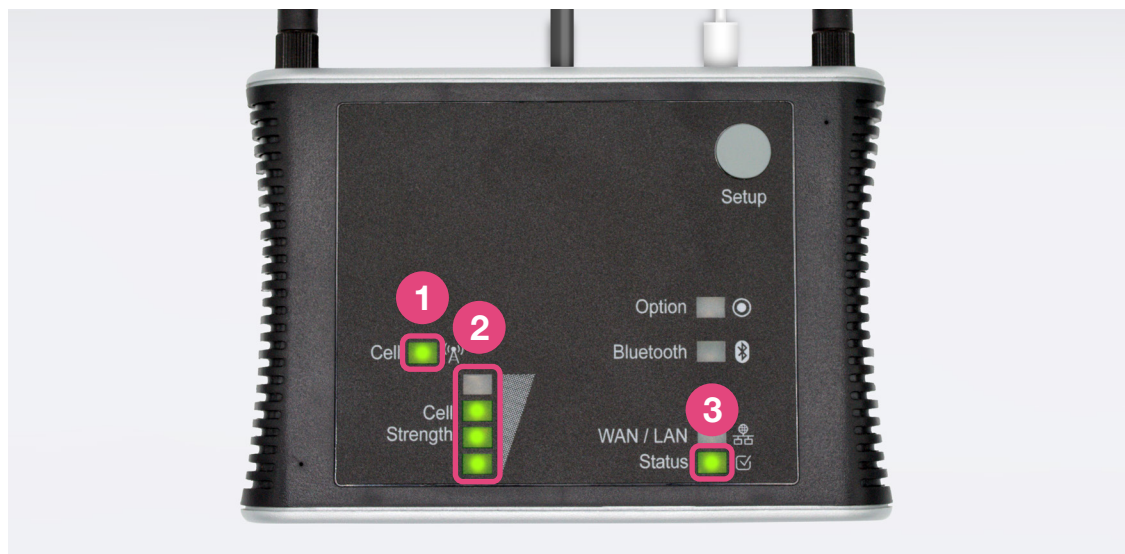

1 LED de señal

☒ Encendido

Conectado a una red celular

☐ Apagado

No conectado a una red celular

2 LED de intensidad de la señal

☒ ☒ ☒ ☒

Mejor recepción

☒ ☒ ☒ ☐

☒ ☒ ☐ ☐

☒ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐

Recepción deficiente (intente reubicar el dispositivo cerca de una ventana)
Sin recepción

3 LED de estado

☒ Verde sólido

La unidad funciona correctamente

☒ ☐ Verde intermitente

Se están recibiendo o transmitiendo datos

☒ Rojo sólido

Se produjo un error del sistema; reinicie el dispositivo

☒ ☒ Rojo y luego verde

La unidad se está iniciando

☐ Apagado

No hay energía o la unidad no está operativa

Conectar la cicladora Liberty Select al Gateway

1. Asegúrese de que la cicladora esté **APAGADA**.



2. **Conecte** el extremo RS-232 del cable a la cicladora. **Presione** los tornillos de mariposa para ajustar firmemente el conector.



3. **Gire** ambos tornillos de mariposa en el sentido de las agujas del reloj con los dedos hasta que queden apretados.

Precaución: **No utilice un destornillador** para ajustar la conexión del cable. Es posible que se produzcan daños en su dispositivo.



- 4. Conecte** el extremo USB del cable al puerto USB del Gateway.

Nota: El Gateway celular debe estar encendido durante **5 minutos** antes de encender la cicladora.



- 5. Encienda** la cicladora Liberty Select.



Lea las instrucciones de uso para un uso seguro y adecuado de este dispositivo. Para obtener una descripción completa de los peligros, contraindicaciones, efectos secundarios y precauciones, consulte la etiqueta completa del paquete en www.fmcna.com

Indicaciones de uso: la cicladora Liberty Select de Fresenius está indicada para la diálisis peritoneal aguda y crónica.

Precaución: la ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo por parte de un médico o por orden de un médico.

Uso: el Gateway kinexus está diseñado para transmitir datos de terapia de diálisis en el hogar y datos de pacientes que utilizan ciertos productos de Fresenius Medical Care, incluidas las cicladoras de diálisis peritoneal.

kinexus no es una historia clínica electrónica (Electronic Health Record, EHR) ni una solución de facturación.

© 2024 Fresenius Medical Care. Todos los derechos reservados. Fresenius Medical Care, el logotipo del triángulo, Liberty y kinexus son marcas comerciales de Fresenius Medical Care Holdings, Inc. o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

P/N 104271-01S Rev. B 10/2024