




MÁS INFORMACIÓN SOBRE

DELFLEX® en Biofine®

Perforación de la abertura

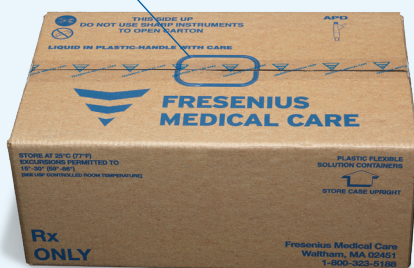

Soluciones proporcionadas:

¿Cuál es el siguiente paso?

Ahora que ha recibido la solución de diálisis peritoneal (DP), es hora de aprender a prepararse lo mejor posible para su tratamiento. Antes de comenzar, observe la perforación de ayuda de apertura que aparece en la parte superior de la caja.

*Función simplificada para uso del paciente

Fácil de usar¹. Configuración sencilla¹.




Apertura de la caja

1. Seleccione la concentración de dextrosa necesaria viendo la **etiqueta envolvente*** en el exterior de la caja.
2. Sujete el extremo de la cinta adhesiva del prospecto y tire de la cinta hasta que se retire completamente de la caja.
3. Presione hacia abajo la perforación de ayuda de apertura en el centro de la caja y levante las cuatro solapas.
4. Levante la caja utilizando las asas de las solapas internas.



RECUERDE: No levante la caja por perforaciones en las solapas superiores, sino por las asas de las solapas internas.

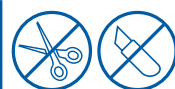

Precauciones:

Evite usar objetos filosos para abrir la caja de envío de la solución



5. Localice el **mango en la envoltura*** de la bolsa de solución y levante la bolsa de la caja. Coloque las bolsas de solución en la envoltura sobre una superficie de trabajo limpia y plana.



Extracción de la envoltura

1. Localice y tire de las **lengüetas de extracción de la envoltura***.
2. Sujete una lengüeta en cada mano, tire hacia abajo a lo largo de la longitud de la bolsa para abrirla y separe la envoltura de la bolsa de solución.
3. Limpie toda la humedad de la bolsa de solución y colóquela en una superficie de trabajo limpia.
4. Deseche la envoltura según las instrucciones del enfermero de terapia en el hogar.





Prepare la bolsa de solución

1. Compruebe cada DELFLEX de la bolsa de solución Biofine para ver si hay potencia, claridad, cantidad, fugas, caducidad (Strength, Clarity, Amount, Leaks, Expiration, S.C.A.L.E.) revisando la bolsa, la etiqueta de la bolsa y la **etiqueta de código de barras blanca***.



RECUERDE: El color normal de la solución de DP puede variar de transparente a ligeramente amarillo.



2. Coloque la bolsa de solución más grande en la bandeja del calentador y conéctela a la línea con la pinza roja. Todas las demás bolsas de solución deben conectarse según las instrucciones del enfermero de terapia en el hogar y utilizando la **lengüeta de suspensión***, cuelgue la bolsa en el lateral del carro Liberty o acuéstela cerca del ciclador, pero no más de 3 pies por debajo de este.



RECUERDE: La bolsa del calentador debe contener 1000 ml más que el primer volumen de llenado.



3. Usando una técnica aséptica, conecte las bolsas de solución al ciclador cuando este lo solicite. Desenrosque la tapa de color sólido* de la vía de administración de la bolsa de solución y la tapa protectora del conector de la línea de solución del conjunto del ciclador. **Asegure estos dos conectores con un movimiento de giro para fijarlos en su sitio.** Repita el paso para cada bolsa de solución necesaria.



4. Rompa el cono de cada bolsa de solución conectada cuando el ciclador lo solicite. Localice el cono rojo dentro del tubo que hay junto al conector Safe-Lock®. A continuación, coloque el pulgar firmemente sobre el tubo sobre el cono y empujelo hacia la pared exterior del tubo y lejos de la bolsa.



RECUERDE:  **NO empuje el cono rojo hacia** arriba en la bolsa de solución. El **cono se ha rediseñado*** para permanecer en el cuello de la vía de administración y no entrar en la solución.



5. Continúe con la configuración y realice su tratamiento según lo prescrito.
6. Al final del tratamiento, deseche la bolsa de solución y el juego de ciclador usado según las instrucciones del enfermero de terapia en el hogar.



► **PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS, ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA**

Servicio al cliente: 1-800-323-5188

Asistencia técnica: 1-800-227-2572

DELFLEX en Biofine 3L	Número de pieza
DELFLEX BIOFINE 1,5 % DEX LM/LC 3L, 4PK	077-30321
DELFLEX BIOFINE 2,5 % DEX LM/LC 3L, 4PK	077-30322
DELFLEX BIOFINE 4,25 % DEX LM/LC 3L, 4PK	077-30324

DELFLEX en Biofine 6L	Número de pieza
DELFLEX BIOFINE 1,5 % DEX STD 6L, 2PK	077-60611
DELFLEX BIOFINE 2,5 % DEX STD 6L, 2PK	077-60612
DELFLEX BIOFINE 1,5 % DEX LM/LC 6L, 2PK	077-60621
DELFLEX BIOFINE 2,5 % DEX LM/LC 6L, 2PK	077-60622
DELFLEX BIOFINE 4,25 % DEX LM/LC 6L, 2PK	077-60624

REFERENCIA

1. Datos de archivo de Fresenius Medical Care, fecha de entrada en vigor: 04/2020.

INDICACIONES DE USO

DELFLEX® está indicado en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica en pacientes que reciben diálisis peritoneal.

PRECAUCIÓN

Usar solo si la solución está transparente y el recipiente no está dañado. Deseche cualquier parte no utilizada. Lea el prospecto para obtener información completa.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- Destinado únicamente a la administración intraperitoneal
- Prohibida la administración intravenosa o intra arterial
- Utilice una técnica aséptica durante todo el procedimiento
- Monitoree de forma rutinaria los desequilibrios electrolíticos, de líquidos y nutricionales
- Monitoree si hay signos de peritonitis o sobrellenado
- Inspeccione el líquido drenado para comprobar si presenta fibrina o turbidez
- Asegúrese de que no haya fugas alrededor del catéter
- Las reacciones adversas relacionadas con la solución pueden incluir peritonitis, infección en el lugar del catéter, desequilibrios de electrolitos y líquidos, hipovolemia, hipervolemia, hipertensión, síndrome de desequilibrio, calambres musculares, dolor abdominal, distensión abdominal y molestias abdominales.

DELFLEX solo está disponible con receta. Para obtener información de seguridad adicional, consulte la información de prescripción completa. Para notificar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, póngase en contacto con Fresenius Medical Care North America llamando al 1-800-323-5188. Se le recomienda reportar los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch. Visite MedWatch o llame al 1-800-FDA-1088.

El material de la bolsa Biofine está diseñado para ser más respetuoso con el medio ambiente y hasta un 46 % más fino que los contenedores alternativos; esto ahorra materias primas y reduce los desechos. Biofine también se degrada tras la incineración, evitando la liberación de ácido clorhídrico. Delflex en Biofine es fabricado por Fresenius Medical Care.

