




6008

**Wir reduzieren die Komplexität –
damit Sie mehr Zeit für Ihre Patienten haben.**

Kardioprotektive Hämodialyse

In der heutigen Zeit sind Dialysepatienten zunehmend älter und multimorbid. Viele Patienten haben zusätzlich zur Nierenerkrankung auch schwerwiegende Erkrankungen wie kardiovaskuläre Schädigungen. Die Kardioprotektion sollte deshalb die höchste Priorität in der modernen Hämodialysetherapie haben.

Die Kombination aus langjähriger Erfahrung in der Dialyse und fortschrittlichen Technologien bei Fresenius Medical Care ermöglicht die effektivsten kardioprotektiven Hämodialysetherapien und hilft Ihnen dabei, Ihre Patienten zu schützen.

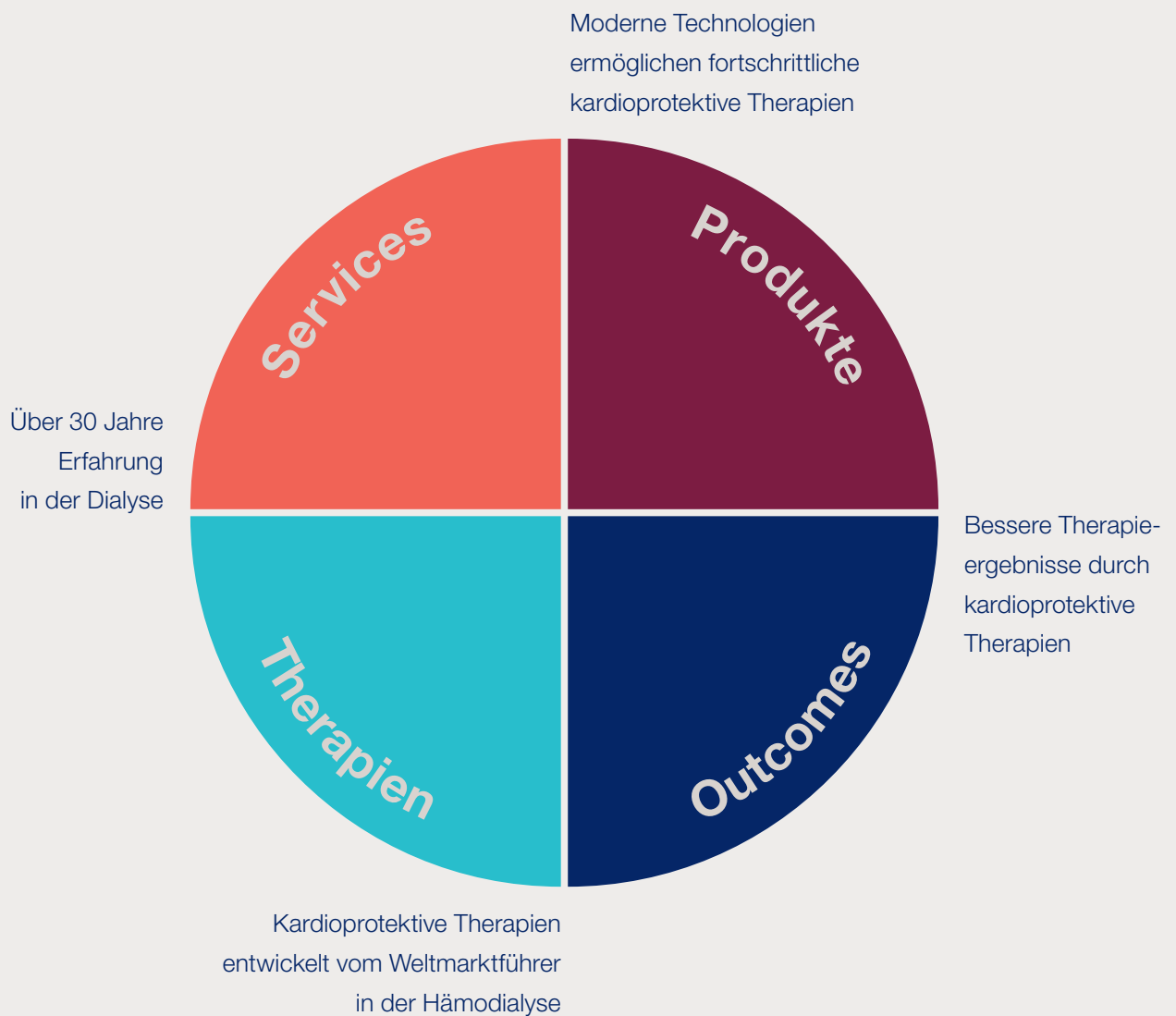

Die neue 6008

Die innovative 6008 stellt den nächsten Schritt in der kardioprotektiven Hämodialyse dar. Sie verbindet die höchsten Therapiestandards von Fresenius Medical Care mit einer Optimierung der Dialysetherapie bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtkosten. Es minimiert die Anzahl der risikorelevanten Arbeitsschritte

und reduziert die Komplexität in der Durchführung der Therapie – damit mehr Zeit für die direkte Patientenversorgung bleibt. So können mehr Patienten von verbesserten Therapieergebnissen und einer höheren Versorgungsqualität profitieren.

More care. Less complexity.

**Höchste
Fresenius Medical Care
Therapiestandards**

**Hohe Sicherheit für
Anwender und Patienten**

**Optimierte
Arbeitsprozesse**

**Direkte
Kosteneinsparungen**



Höchste Fresenius Medical Care Therapiestandards

Geringere Komplexität in der Ausführung der Dialysetherapie

- Einfacher und flexibler Wechsel der Behandlungsarten über Touch-Screen ohne manuellen Eingriff ins extrakorporale System
 - Doppelnadel ↔ Single-Needle
 - HD ↔ H(D)F in Prä- oder Post-Dilution
- Ein Blutschlauhsystem (6008 CAREset) für alle Standardtherapien: HD und H(D)F im Doppelnadel- oder Single-Needle-Verfahren
- Innovatives Single-Needle System mit pneumatischer Blutpumpe für eine effektive Single-Needle Behandlung und reduziertem extrakorporalen Volumen

Vorteile für Ihre Patienten

- Luftfreies extrakorporales System mit minimiertem Blut-Luft-Kontakt reduziert das Clotting-Risiko in der Behandlung¹
- Reduziertes extrakorporales Blutvolumen (6008 CAREset) mit minimierten Kontakt zwischen Blut- und Fremdmaterialien für eine optimierte Antikoagulation¹
- 6008 CAREset mit biokompatiblen Materialien (Biofine®) und reduziertem PVC- und Weichmacheranteil²
- Mehr Patienten profitieren von verbesserten Ergebnissen aufgrund der einfachen Durchführung der HighVolumeHDF®-Therapie⁶



Hohe Sicherheit für Anwender und Patienten

Weniger risikorelevante Schritte für Patienten und Anwender

- Wegfall von kritischen Konnektionen: – 23 % bei Katheterpatienten und – 27 % bei Fistelpatienten³
- Automatische Konnektion mit dem integrierten Substitutat-Port
- Simultane arterielle und venöse Reinfusion im geschlossenen Kreislauf (ONLINE-Closed-Circuit-Reinfusion)

Die 6008 bietet ein hohes Maß an Sicherheit für Patienten und Anwender

- Geringeres Kontaminationsrisiko durch Wegfall von konventionellen Druckaufnehmern
- Automatisches Entleeren von 6008 CAREset und Dialysator




Optimierte Arbeitsprozesse

Weniger Arbeitsschritte

- Automatische Geräteprozesse führen zu weniger Interaktionen und dadurch zu Zeiteinsparungen von rund 3 min (36 %) (für eine Krankenschwester, die einen Fistelpatienten behandelt)⁵
- 24 %ige Reduktion von Handhabungsschritten im Vergleich zu konventionellen Hämodialysegeräten³
- Vollautomatisches Füllen und Spülen des extrakorporalen Systems in einem Schritt (z. B. kein Warten auf T1-Test)
- Vollständig vorkonnetiertes 6008 CAREset:
Keine manuellen Konnektionen notwendig

Mehr Zeit für die Patientenversorgung

- Weniger arbeitsbezogener Stress für das Pflegepersonal
- Mehr Zeit für die direkte Patientenversorgung und die Patientenaufklärung
- Verbesserte Qualität der Versorgungsleistung

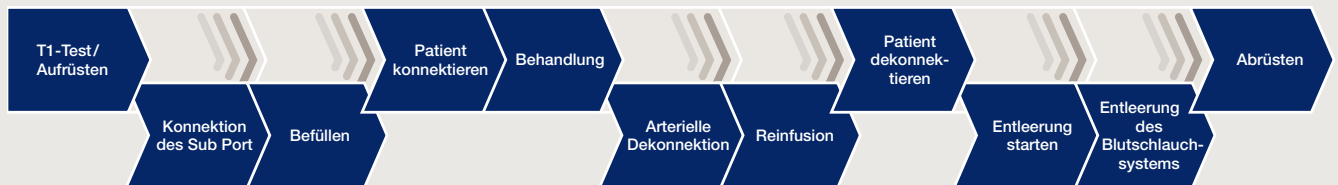

Automatische Geräteprozesse führen zu weniger Interaktionen mit dem 6008 CAREsystem




Direkte Kosteneinsparungen

Einfache Logistik und weniger Abfall

- Einfachere Logistik und Lagerhaltung durch das 6008 CAREset – ein System für alle Standardtherapien
- Weniger Abfallgewicht² durch leichte Materialien (Biofine®) und kompaktes Kassetten-Design
- Automatisches Entleeren von 6008 CAREset und Dialysator führen zu einem reduziertem Abfallgewicht⁴

Höhere Umweltfreundlichkeit und Kosteneinsparungen

- Kassettenkorpus aus umweltverträglichen und biokompatiblen Material (Biofine®)
- Durch den Einsatz des 6008 CAREset ergeben sich deutliche Einsparungen von PVC (mehr als 66 % im Vergleich zu 5008-Blutschlauchsystemen)²
- Durch weniger Abfallgewicht pro Behandlung können sich länderspezifisch deutliche Einsparungen bei den Entsorgungskosten für ein Dialysezentrum ergeben⁴

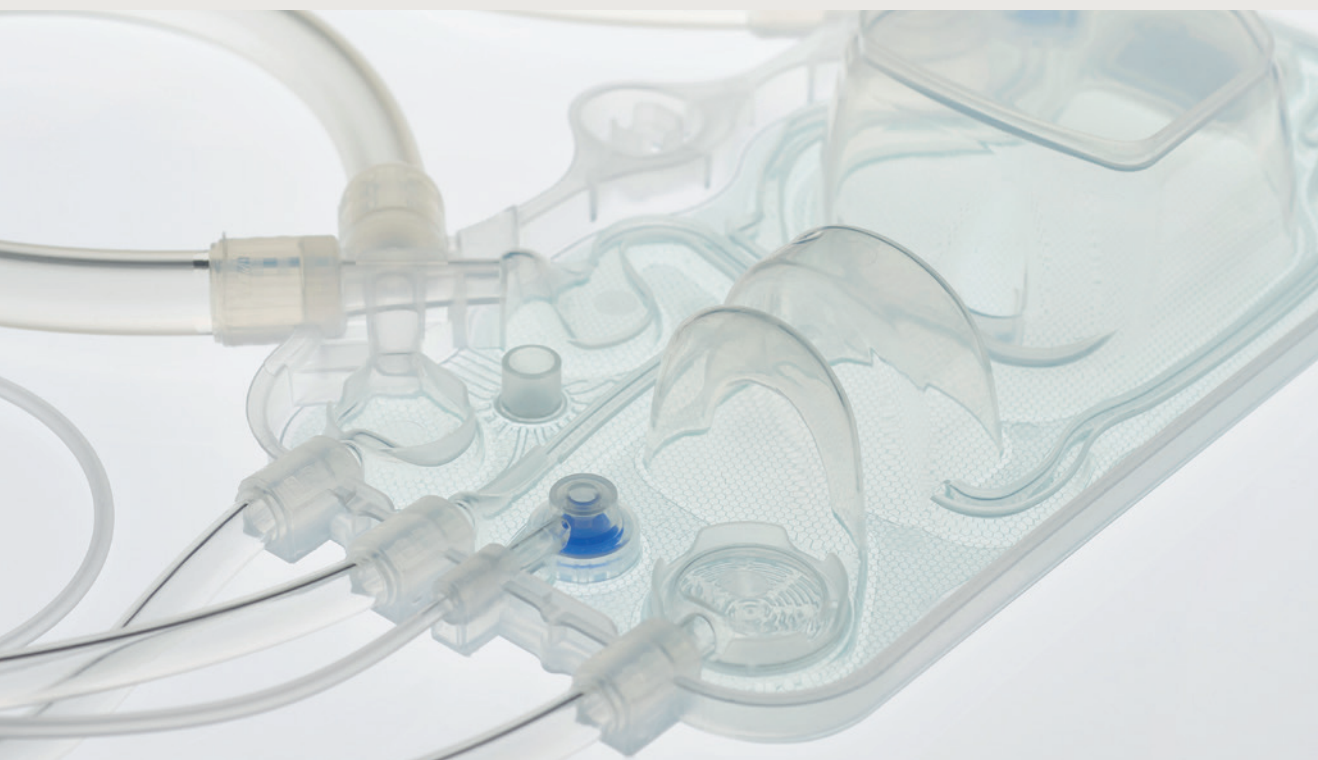

Referenzen

1. Kessler M et al. Anitcoagulation in Chronic Hemodialysis. Semin Dial. 2015 Sep-Oct;28(5):474-89
2. Internal data on file, Fresenius Medical Care, 2017
3. Tsobanelis T et al., EDTA Poster MP634 (2016); Haemodiafiltration Relative Infection Risk: A Comparative Analysis of Two Dialysis Machines.
4. Schleser A et al., EDTA Poster MP461 (2016); The Impact of Disposables Towards More Eco-Friendly and Less Costly Haemodialysis.
5. Workflow Analysis by REFA, 6008 system in comparison to Therapy System 5008, March 2016.
6. Maduell F et al., J Am Soc Nephrol 24:487-97, 2013